




מכשיר להסרת שיער בראון Silk Expert Pro 5, Braun IPL PL5XXX

Model: PL5014, PL5015, PL5111, PL5117, PL5124, PL5131, PL5137

- הוראות הפעלה -



BRAUN

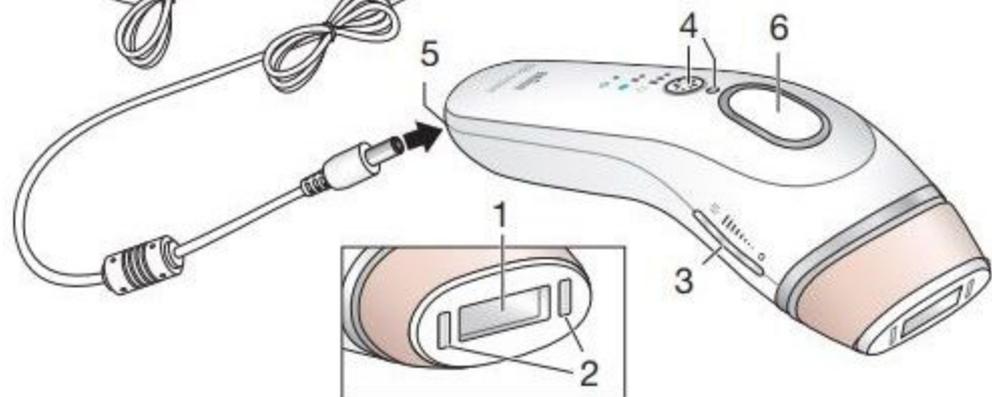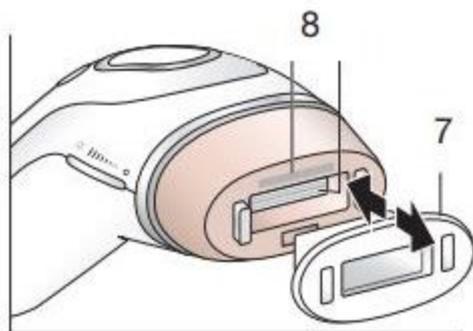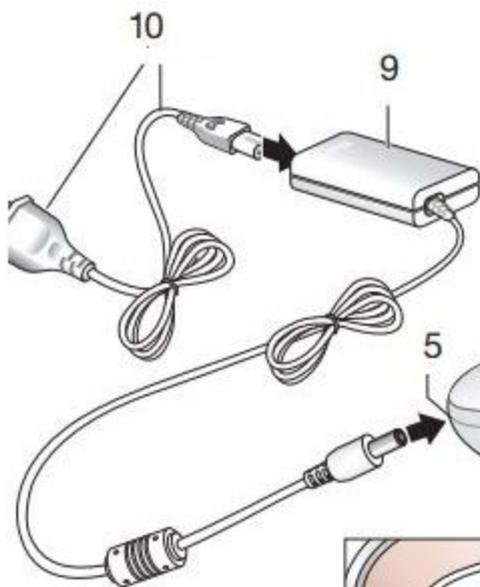

בראון מציגה את הדור האחרון של הסרת שיער ביתי Pro 5 IPL. מכשיר ה-Pro 5 של משי הוא ה-IPL הבטוח, המהיר והיעיל ביותר של בראון, ומסייע להפחית לצמיתות שיער על הפנים,

הגוף והרגליים תוך ארבעה שבועות.

ה-IPL מסתגל אוטומטית לגוון העור שלך בכדי לספק חווית הסרת שיער בטוחה ויעילה יותר. ה-Silk-Expert Pro מסוגל לטפל בשתי הרגליים התחתונות תוך פחות מחמש דקות.

השלם עם ראש מדויק למיקוד לאזורים קטנים יותר כמו הפנים, השחי וקו הביקיני. * לא מתאים לשימוש על שיער אדום, מאוד בלונדיני, אפור או לבן. מאפיינים:

עיצוב קומפקטי

טכנולוגיית TM SensoAdapt

400,000 הבזקים

10 רמות עוצמה

ראש דיוק לאזורים קטנים יותר

תיאור (איור 1)

8 מכלול הסרת שיער מדויק (מתאים לכל אזורי הגוף כולל שפה עליונה, הסנטר והלחיים)

9 ספק כוח

10 תקע

כולל נרתיק אחסון

הערה: המסנן הראשי משולב במכשיר ובכך מבטיח שימוש בטוח באזורי גוף שמתחת לצוואר. לכן, לא נדרש מסנן נוסף למכלול הסרת השיער מהגוף. עם זאת, מכלול הסרת השיער המדויק כולל מסנן נוסף לטיפול בטוח ונעים על עור רגיש, כמו הפנים.

1 חלון יציאת הבזקי האור עם מסנן UV

2 חיישני גוון עור של TM SensoAdapt

3 נורית חיווי 'מוכן להבזק'

4 לחצן מצב עדין עם נוריות חיווי

5 שקע כניסת מתח

6 לחצן הבזק

7 מכלול הסרת שיער מהגוף (מתאים לכל אזורי הגוף מתחת לצוואר)

טכנולוגית הבזקי אור IPL מרוכזים לשימוש ביתי

מכשיר הסרת השיער בלייזר זה משתמש בטכנולוגיה המבוססת על הבזק אור מרוכז (IPL). שוק מכוני היופי המקצועיים להסרת שיער משתמש טכנולוגיית IPL זו כבר כ-15 שנים. מביאה כעת את הטכנולוגיה החדשנית הזו לביתך.

מניעת צמיחת שיער מחדשת שיער יעילה להחלקות יומיומיות

שיטה זו מאפשרת לך למנוע צמיחת שיער מחדשת של שיער לאורך זמן, ועור חלק כמשי. המחקרים שלנו הראו גם ירידה משמעותית בחידוש וצמיחת השיער כבר אחרי שני טיפולים. תוצאות אופטימליות הושגו בצורה ודאית לאחר 4-5 טיפולים. ירידה בצפיפות השיער ניכרת גם מטיפול לטיפול. מידת השפעת הטיפול הניכרת לעין, ופרק הזמן שהתוצאות מחזיקות מעמד משתנים מאשה לאשה.

טיפול עדין גם באזורים הרגישים ביותר בגוף

מסיר השיער פותח בפיקוח צמוד של רופאי עור מובילים על מנת להשיג טיפול יעיל, אפקטיבי ועדין גם באזורים הרגישים ביותר בגוף. המכלול המדויק אפילו מאפשר לך להשתמש במכשיר בבטיחות על הפנים שלך.

אין צורך להחליף נורות, ואין תוצאות סמויות


מכשיר הסרת השיער בלייזר מצויד בנורה עם ביצועים גבוהים שאינה מתכלה ואין צורך להחליפה. היא יכולה ליצור מעל 400,000 הבזקים ומאפשרת לך להשיג תוצאות מעולות במשך 5 שנים* עם חיסכון כספי משמעותי מכך שאין צורך לרכוש נורות חילופיות.

*הנתון מבוסס על תרחיש שימוש ממוצע ועל משטר טיפול מומלץ למשתמש בודדת.

אופן הפעולה של טכנולוגית הבזקי אור מרוכזים IPL

צמיחת השיער


קצב צמיחת השיער שונה מאשה לאשה, בהתאם גיל, חילוף החומרים וגורמים נוספים. אולם בעיקרון, צמיחת השיער מתבצעת ב-3 שלבים:

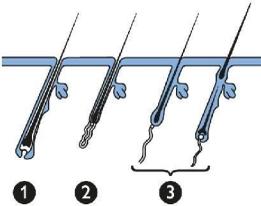


1. שלב הצמיחה (שלב אנאגני)
השיער צומח מהשורש. בשלב זה ריכוז המלאנין הוא הגבוה ביותר. המלאנין אחראי לפיגמנטציה של השיער. ריכוז המלאנין הוא פקטור הקובע את האפקטיביות של השיטה. רק שער בשלב הצמיחה מגיב לטיפול בהסרת שיער באמצעות אור.
2. שלב עצירת הצמיחה (שלב קטאגני)
צמיחת השיער נפסקת והשורש מתכווץ לפני שהשיער נושר.
3. שלב התרדמת (שלב טלוגני)
השיער הישן נפרד מהזקיק ונושר. הזקיק נשאר רדום עד שהשעון הביולוגי מעיר אותו לפעילות, ומתחילה צמיחת שיער חדשה.

עיקרון הפעולה

- המכשיר פועל באמצעות חימום השיער והשורש שלו שמתחת לעור. המלאנין בשיער ובשורש השיער סופג את הבזקי האור. ככל שהשיער יותר כהה, כמות האור הנספגת גבוהה יותר. תהליך זה גורם לשיער לעבור לשלב התרדמת.

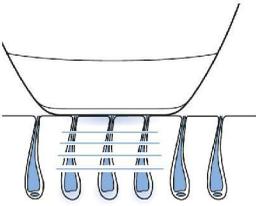

- בין הטיפולים, השיער נושר באופן טבעי וצמיחת השיער נעצרת. נשירת השיער נמשכת בין שבוע לשבועיים.

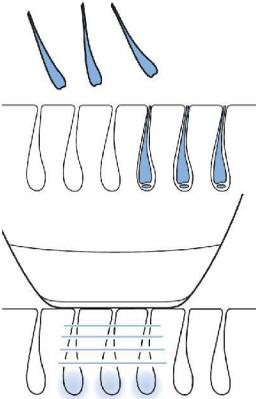

- הסרת שיער אופטימלית לא מתקבלת לאחר טיפול אחד מכיוון שהתהליך עובד כאמור רק על השיער שנמצא בשלב הצמיחה. בעת הטיפול, השיער באזור שעבר טיפול נמצא בשלבים שונים של צמיחה. על מנת לטפל בצורה אפקטיבית בכל השערות באזור זה, במשך החודשיים הראשונים עליך לחזור על הטיפול אחת לשבועיים.

מסנן אופטי מובנה מבטיח שקרינת UV לא תחדור לעור ושהטיפול יהיה בטוח לעור.

אמצעי בטיחות

אנא קראי הוראות בטיחות אלו בעיון רב לפני תחילת השימוש במכשיר, ושמרי על החוברת לכל צורך שימוש עתידי.

סכנה



- מים וחשמל מהווים שילוב מסוכן. אל תשתמשי במכשיר במקום רטוב (בקרבת או מעל כיור רחצה או אמבט מלא מים).
- שמרי על המכשיר וספק הכוח יבשים.
- במידה והמכשיר נשבר, אל תגעו בחלקים הפנימיים שלו כדי למנוע התחשמלות.
- לעולם אל תחדירי חפצים כלשהם דרך פתחי האוורור.

אזהרה

- המכשיר אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות גופניות, תחושתיות או נפשיות מוגבלות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תודרכו כיצד להשתמש במכשיר על ידי אדם בוגר האחראי לביטחונם.
- השגיחי על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים מתחת לגיל 15.
- נערות בגילאי 15-18 תוכלו להשתמש במכשיר תחת פיקוח ו/או סיוע של ההורים או אדם מבוגר סמכותי. מבוגרים מעל גיל 19 יוכלו להשתמש במכשיר בחופשיות.

- השתמשי אך ורק בספק הכוח המסופק עם המכשיר.
- אל תשתמשי במכשיר או בספק הכוח אם הם פגומים.
- ספק הכוח כולל שנאי. מטעמי בטיחות, אל תחתכי אותו על מנת להחליף אותו בתקע אחר.
- אם ספק הכוח ניזוק, עליך להחליפו בדגם זהה, למניעת סכנה.
- אל תשתמשי במכשיר אם הזכוכית בחלון יציאת הבזקי האור שבורה.
- אל תשתמשי במכלול המדויק אם הזכוכית האדמדמה שבורה.

למניעת נזק

- וודאי ששום דבר לא חוסם את זרימת האוויר דרך פתחי האוורור.
- לעולם אל תחשפי את המכשיר לרעידות, זעזועים או מכות חזקות, ואל טלטלי או תפילי אותו.
- כשאת מעבירה את המכשיר ממקום קר למקום חם או להיפר, אפשרי לו להגיע לטמפרטורת הסביבה הנוכחית במשך כ-3 שעות לפני שתשתמשי בו.
- אפשרי למכשיר להתקרר לאחר השימוש, ולאחר מכן, אחסני אותו בנרתיק המקורי המסופק באריזה כדי שלא יצבור אבק.
- לעולם אל תשאירי את המכשיר פועל ללא השגחה. כבי אותו תמיד בסוף השימוש.
- למניעת נזק, אל תחשפי את המכשיר לקרינה ישירה של השמש או לקרינת UV ממושכת.
- אל תבזקי את האור על משטח כלשהו פרט לעור. הדבר יכול לגרום נזק למכלול הראש ו/או לחלון יציאת הבזקי האור. יש להבזיק רק כשהמכשיר נמצא במגע עם העור.

זהירות



- לעולם אל תשתמשי במכשיר להסרת השיער באזור העיניים וליד הגבות. הדבר יכול לגרום נזק לראייה.
- השתמשי במכשיר רק עם הכיוונים המתאימים לסוג עורך (עייני בפסקה 'עוצמות הבזקי מומלצות' שבפרק 'הכנה לשימוש').
- שימוש בעוצמת יתר עלולה לגרום לתופעות לוואי ולהשפעות לא רצויות לעור.
- מכשיר להסרת שיער זה מיועד אך ורק להסרת שיער אדם באזורים שמתחת לקו הצוואר באמצעות שני המכלולים הנשלפים המסופקים. אל תשתמשי בו לשום מטרה אחרת.
- ודאי שהעור באזור המטופל נקי, יבש וללא קרמים, משחות ותכשירים קוסמטיים אחרים. אם העור אינו נקי ויבש, מערכת הבטיחות המשולבת עשויה שלא לפעול כראוי והמכשיר לא יוכל להבזיק ואו עשוי להבזיק בצורה לא מכוונת.
- אל תשתמשי במכשיר באחד מהמצבים המתוארים בפרק 'הגבלות בשימוש'.

קחי בחשבון את ההערות המפורטות להלן כדי לשמור על תקינות מכשיר הסרת השיער שלך לאורך זמן:

- בעת השימוש, אל תחשפי את המכשיר לטמפרטורה הנמוכה מ-15°C או גבוהה מ-35°C.
- מסיר השיער שלך מצויד במנגנון להגנה מפני חימום יתר מובנה. אם המנוע מתחמם יתר על המידה, המכשיר לא יבזיק את האור. במקרה זה, אל תכבי את המכשיר אלא הניחי לו להתקרר במשך 15 דקות לפני שתמשיכי בטיפול. לאחר כ-5 דקות המכשיר כבה אוטומטית. לאחר מכן אפשרי לו להתקרר במשך כ-10 דקות נוספות.

למי מסיר השיער אינו מתאים?

מסיר השיער אינו מתאים לכולם. אם אחד המקרים הבאים תקף לגבייך, אל תשתמשי במכשיר!

אל תשתמשי במכשיר אם את בהריון או שאת מניקה

מסיר השיער לא נבדק על נשים בהריון, לכן אנו ממליצים לך לא להשתמש במכשיר אם את בהריון או מניקה. שינויים הורמונליים עשויים להגביר את רגישות עורך, ולחשוף או עורך לסכנת פציעה.

לעולם אל תשתמשי במכשיר אם סוג עורך ו/או צבע השיער אינם מתאימים:

- אם סוג עורך הוא V (את רק לעתים נדירות משתזפת, את משתזפת טוב מאוד וצבע עורך הוא חום כהה) או אם סוג עורך הוא VI (את רק לעתים נדירות או לעולם לא משתזפת, וצבע השיזוף שלך מאוד כהה; צבע עורך הוא חום שחור או כהה יותר). במקרה זה את חשופה לסיכון גבוה להתפתחות תגובות עוריות, כגון שינוי גוון העור, אדמומיות חזקה או כוויות, כאשר את משתמשת במסיר השיער עייני גם בסעיף 'תופעות לוואי אפשריות ותגובות בעור' שבפרק 'השימוש במכשיר', ופעלי בהתאם ל- 'טבלת עוצמות אור מומלצות' במדריך להתחלת מהירה.
- אם צבע השיער הטבעי שלך באזורי הטיפול הוא בלונד בהיר, לבן, אפור או אדמוני, הטיפול לא יהיה יעיל.

אל תשתמשי במכשיר הסרת השיער כדי לטפל

באזור כלשהו יותר מפעם בשבועיים.

אל תשתמשי במכשיר במידה ואת סובלת מאחת המחלות הבאות

- אם את סובלת ממחלת עור כמו סרטן עור פעיל, היה לך סרטן עור בעבר או סרטן מקומי באזורים שברצונך לטפל.
- אם יש לך נגעים טרום סרטניים או שומות לא טיפוסיות רבות באזורים שברצונך לטפל.
- אם יש לך היסטוריה של הפרעות בקולגן (חלבונים), כולל היסטוריה של היווצרות צלקת קלאודית (צמיחת יתר צלקתית) או היסטוריה של פצעים שלא מגלידים.
- אם יש לך היסטוריה של הפרעות בכלי דם, כמו דליות וורידים בולטים או כלי דם מורחבים באזורים שברצונך לטפל.
- אם העור שלך רגיש לאור ונוטה לפתח פריחה או תגובה אלרגית.

- אם יש לך זיהומים, אקזמה, כוויות, דלקת בזקיקי השיער, פצעים פתוחים, שריטות, הרפס או שטפי דם, פצעים או שטפי דם פנימיים, באזורים שברצונך לטפל.
- אם עברת ניתוח באזורים שברצונך לטפל.
- אם יש לך אפילפסיה עם רגישות להבדקי אור.
- אם יש לך סוכרת, זאבת, פורפיריה או קצב לב לא סדיר.
- אם יש לך בעיות בקרישת דם.
- אם יש לך היסטוריה של כשל חיסוני (כוללים זיהום ב-HIV או איידס).

לעולם אל תשתמשי במכשיר במידה ואת נוטלת תרופות המופרטות להלן:

- אם כעת העור שלך מטופל העור או אם טופל לאחרונה עם Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), (BHAs) Beta- Hydroxy Acids, topical isotretinoin וחומצה אזלאית.
- אם השתמשת בכל צורה של isotretinoin כגון Accutane® או Roaccutane® בששת החודשים האחרונים. בשימוש בתרופות אלו גורם לעור רגישות יותר לדמעות, פצעים וגירויים.
- אם את משתמשת במשככי כאבים, אשר למפחיתים את רגישות העור לחום.
- אם את לוקחת תכשירים או תרופות הרגישים לאור, בדקי את העלון המצורף לתרופה, ולעולם אל תשתמשי במכשיר אם מצוין בעלון שהוא עלול לגרום לתגובות רעילות בעת חשיפה לאור, או אם עלייך להימנע מחשיפה לשמש בעת נטילת תרופה זו.
- אם את לוקחת תרופות נוגדות קרישה, כולל שימוש נרחב באספירין, באופן שאינו מאפשר לך להפסיק את השימוש בהם למשך שבוע לפחות לפני כל טיפול עם מכשיר הסרת השיער.
- אם את לוקחת תרופות לדיכוי המערכת החיסונית.

אל תשתמשי במסיר השיער באזורי הגוף המפורטים להלן:

- מסביב לעיניים וליד הגבות.
- בפטמות, בואגינה, בפי הטבעת, באזור הפות, בנחיריים ובתוך האוזניים. למידע נוסף עייני בפסקה 'השימוש במכשיר באזור הביקיני' שבפרק 'השימוש במכשיר'.
- לגברים אסור להשתמש באזור שק האשכים ובפנים. שיער הפנים של גברים שונה משיער הפנים של נשים ומכלול הסרת השיער המדויק מיועד אך ורק לטיפול בשיער הפנים של נשים.
- מעל או בקרבה לשתלי סיליקון, קוצב לב, מזרקים שנמצאים בווריד דרך קבע (לאינסולין וכד') או ליד פירסינג.
- באזור שומות, נמשים, כלי דם גדולים וכתמים כהים בעור ללא התייעצות עם רופא. הטיפול יכול לגרום לכוויות ולשינוי גוון העור, דבר שעלול להקשות על זיהוי מחלות עור (לדוגמה סרטן העור).
- על יבלות, קעקועים, איפור קבוע. הדבר יכול לגרום לכוויות ולשינוי בגוון העור (תת-פיגמנטציה או יתר-פיגמנטציה).
- באזורים שבהם את נוהגת להשתמש בדאודורנט שעלול לגרום לרגישות בעור. למידע נוסף, עייני בסעיף 'תופעות לוואי אפשריות ותגובות בעור' שבפרק 'השימוש במכשיר'.

לעולם אל תשתמשי במכשיר על עור שנפגע מכוויות שמש, שיזוף שבוע לאחרונה (בשבועיים האחרונים) או שיזוף מלאכותי



- כל סוגי השיזוף עלולים להשפיע על בטיחות הטיפול . אזהרה זו מתייחסת לחשיפה לשמש כמו גם לשיטות שיזוף מלאכותיות, כמו למשל, קרם שיזוף, מכונת שיזוף וכד'. אם יש בכוונתך להשתזף, לפרטים נוספים עייני בסעיף 'עצות לשיזוף' שבפרק 'השימוש במכשיר'. בהמשך החוברת.

הערה: הרשימה לעיל אינה ממצה. במקרה של ספק, לגבי שימוש מותר במכשיר, מומלץ להתייעץ עם רופא.

תופעות לוואי אפשריות ותגובות של העור

גירויים שכיחים בעור:

- בעור עלולה להראות אדמומיות קלה ו/או עקצוצים, דקירות או תחושת חום. תגובה זו אינה מזיקה כלל והיא נעלמת במהירות.
- גירוי בעור הדומה לכוויות שמש עלול להיווצר באזור המטופל והוא אמור להיעלם לאחר זמן קצר. אם הוא לא נעלם תוך 3 ימים, אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא.
- גרוד בעור יבש עלול להתרחש כתוצאה מגילוח או שילוב של גילוח וטיפול בהבזקי אור. הגרוד לא מזיק והוא אמור להיעלם תוך מספר ימים. תוכלי לקרר את האזור עם שקית קרח או מטלית רחצה לחה. אם היובש נמשך, תוכלי למרוח קרם לחות שאינו מבוסס באזור המטופל 24 שעות לאחר הטיפול.

תופעות לוואי נדירות:

- צריבות, אדמומיות ונפיחות מוגזמת: גירויים אלו מתרחשים רק לעתים נדירות והם בדרך כלל כתוצאה משימוש בעוצמת הבזקי אור גבוהה מדי לצבע העור שלך. אם הגירויים הללו לא נעלמים תוך 3 ימים, אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא. המתני עם הטיפול הבא עד שהעור יחלים לחלוטין, וודאי שאת משתמשת בעוצמת הבזק אור נמוכה יותר.
- שינוי בצבע העור: זה קורה לעתים רחוקות מאוד. שינוי בצבע העור בא לידי ביטוי בגוון כהה יותר או בצורת כתם בהיר יותר מאשר האזור שמסביב. תופעה זו נובעת משימוש בעוצמת הבזק גבוהה מדי לצבע העור שלך. במקרים נדירים (בדרך כלל תוצאה של שימוש בעוצמה גבוהה מדי על עור כהה מדי), תופעות של שינוי פיגמנט יכולות להימשך זמן רב יותר ממה שנצפה בדרך כלל. בכל המקרים, בסופו של דבר התופעות הפיכות. אל תטפלי באזורים שצבעם דהה עד שהשינוי בצבע יעלם, והעור יחזור לצבעו הרגיל.
- זיהום בעור ודלקת: מתרחש לעתים רחוקות מאוד, והוא עלולה להיגרם משימוש במכשיר על פצעים או חתכים שנגרמו מגילוח על פצעים שכבר קיימים או על שיער הצומח פנימה.
- כאב מוגזם: עלול להתרחש במהלך טיפול או אחריו, אם השתמשת במכשיר על עור לא מגולח, אם ל השתמשת במכשיר בעוצמת הבזק אור גבוהה מדי לצבע העור שלך, אם הבזקת באותו אזור יותר מפעם אחת, ואם את משתמשת במכשיר על פצעים פתוחים, דלקות, זיהומים, קעקועים, כוויות, וכו'. למידע נוסף עייני בפרק 'הגבלות בשימוש'.

לאחר השימוש


- מיד לאחר הטיפול, אל תמרחי תכשיר קוסמטי מבוסס על האזור המטופל.
- אל תשתמשי בדאודורנט מייד לאחר הטיפול בבית השחי. המתני עד שכל האדמומיות בעור תיעלם לחלוטין.
- למידע נוסף לגבי חשיפה לשמש ושיזוף מלאכותי, עייני בפסקה 'עצות לשיזוף' שבפרק 'הכנה לשימוש'.

להשגת תוצאות מיטביות, הכיני את האזור שבו תרצי להשתמש עם המכשיר כמפורט להלן.

הכנת אזורי הטיפול

1 גלחי את האזורים שבכוונתך לטפל בהם, כל עוד אזורים אלה עדיין מראים סימני צמיחה מחודשת של שיער.

הערה: אל תשתמשי במשחות להסרת שיער במקום הגילוח.

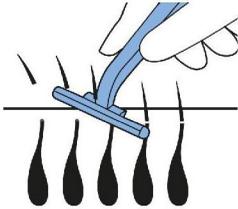

הערה: אם שיטת הסרת השיער האחרונה שלך הייתה באמצעות הסרת השיער מהשורש (למשל, אפילציה), תוכלי להתחיל את הטיפול מיד. להשגת תוצאות מיטביות, במקרה זה, אנו ממליצים לך לגלח את השיער בין הטיפולים.

קחי לתשומת לבך כי טיפול באזורים לא מגולחים או מגולחים בצורה לא נכונה, עשוי לגרום למספר תופעות לא רצויות:

- חלון יציאת הבזקי האור ומכלול הסרת שיער מהגוף עלולים להזדהם משאריות שיער ומכלוך. זיהום בחלון יציאת הבזקי האור ומכלול הסרת שיער מהגוף יקצר את אורך חיי המכשיר ואת יעילותו. בנוסף לכך, זיהום בחלון יציאת הבזקי האור עלול לגרום כאב או תופעות לא רצויות כמו אדמומיות או שינויים בגוון העור.
- שיער על עורך עלול להישרף ולגרום להיווצרות ריח לא נעים.

2 נקי את העור וודאי שהוא נקי משיער, יבש לחלוטין וללא תכשירים שמנוניים (כמו למשל, שאריות דאודורנט, קרם לחות, בושם, קרם שיזוף והגנה וכד').

3 בדקי את המכשיר ובמיוחד את חלון יציאת הבזקי האור ומכלול הסרת שיער מהגוף, וודאי שלא נלכד שיער, אבק וסיבים. אם את רואה סימני לכלוך, נקי אותו כמתואר בפרק 'ניקוי ותחזוקה'.

אם הגילוח גרם לפצעים או גרויים, העור שלך עשוי להיות רגיש יותר להסרת שיער בשיטת IPL מאשר בשיטות האחרות. זה עלול לגרום לך לאי נוחות או להוביל לתופעות לוואי לא רצויות אחרות בעת הטיפול בשיטת IPL. אנו ממליצים לך להמתין עד שהגירוי יעלם. הערות

4 לאחר שהשיער מפסיק לצמוח חזרה, בדרך כלל לאחר כ- 4-5 טיפולים, לא תצטרכי יותר לגלח את האזור המטופל לפני הטיפול.

טבלת עוצמות הבזקי האור המומלצות, תסייע לך הגדיר את עוצמת הבזקי האור הנכונה.

הערה: מכשיר יושבת באופן אוטומטי כאשר העור שלך כהה מדי, כדי למנוע ממך לפתח תגובות בעור. עם זאת, חיישן צבע העור המשולב לא יודיע לך מהי הגדרת עוצמת האור המתאימה לשימוש, מכיוון שהעדפות שונות מאוד מאדם לאדם. מכשיר הסרת השיער נותן לך את החופש לבחור את עוצמת האור הנוחה לך ביותר, כל עוד המכשיר מתאים לצבע העור שלך. כדי לכוון את עוצמת האור הנכונה לשימוש על עורך, אנא עייני בטבלת עוצמות הבזקי האור המומלצות שלהלן, ובמדריך להתחלה מהירה.

1 עייני בטבלה שלהלן כדי לבחור את עוצמות הבזקי האור המתאימות לעור ולצבע שיער הגוף שלך, צבע השיער של הגוף שלך וצבע שיער הפנים (אם לא קיימת עוצמת אור מתאימה לגוון עור/שילוב צבע השיער שלך, היא תסומן בטבלה עם X).

עצה: תוכלי להניח את הטבלה שבמדריך להתחלה מהירה על עורך, ולהשוות אותו עם צבע העור שלך.

עצה: אנו ממליצים לך לשמור את המדריך להתחלה מהירה בתוך הנרתיק לכל צורך בשימוש עתידי.

2 הנמיכי את עוצמת הבזקי האור, אם את חווה כאב או אי נוחות.

נשים עם עור כהה יותר חשופות לסיכון גבוה יותר לגירוי בעור, כי העור שלהן סופג יותר אור. לכן לנשים עם אור כהה יותר, מומלץ להשתמש בעוצמות הבזקי אור נמוכות יותר.

הבזקי האור עלולים לגרום לתחושת חום או חום גבוה בעור, אך לא חייב להכאיב. לאזורי גוף שונים עשויות להידרש עוצמות אור שונות, בהתאם לטבלה שלהלן. כדי למנוע גירויים בעור, עייני בסעיף 'תופעות לוואי אפשריות וגירויים בעור' שבפרק 'השימוש במכשיר'.

עוצמות הבזקי אור מומלצות (1-5)

בטבלה שלהלן, "X" מציינ שהמכשיר אינו מתאים לך.

הערה: צבע העור שלך עשוי להשתנות, למשל, כאשר העור שלך נחשף לשיזוף. ולכן הוא עלול להיות כהה יותר מאשר צבעו בעת הטיפול הקודם. לכן, חשוב שתבדקי את הגדרת העוצמה לפני כל טיפול בכל אחד מאזורי גופך. אזורים מסוימים עשויים להיות כהים יותר מאשר האחרים.

בלונד כהה / חום בהיר / לבן / אפור / אדום
חום / חום כהה / שחור / בלונד בהיר

צבע השיער בגוף

צבע העור והאפיונים:

X	4/5	לבן (כוויות שמש תמידות, אינו משתזף)
X	4/5	בז' (כוויות שמש קלות, שיזוף מינימאלי)
X	4/5	צבע חום בהיר (לפעמים מופיעות כוויות שמש, שיזוף טוב)

בלונד כהה / חום בהיר / לבן / אפור / אדום חום / חום כהה / שחור / בלונד בהיר		צבע השיער בגוף
X	1/2/3	חום בינוני (כוויות שמש לעתים רחוקות, שיזוף מהיר וטוב)
X	X	חום כהה (לעתים רחוקות כוויות שמש, שיזוף טוב מאד)
X	X	חום שחרחר וכהה יותר (לעתים רחוקות כוויות שמש, שיזוף כהה מאד)

עצות לשיזוף

- הימנעי משיזוף בעת השימוש במכשיר הסרת השיער באופן קבוע (אחת לשבועיים).

שיזוף יכול לגרום לעור להתכהות (שיזוף), או יכול לגרום לכוויות שמש (עור אדמומי). השימוש במסיר השיער על עור מוכהה (שזוף) ו/או צרוב מהשמש מגביר את הסיכון לתופעות לוואי שליליות ולגירויים בעור. עייני בסעיף 'תופעות לוואי אפשריות וגירויים בעור' שבפרק 'השימוש במכשיר'.

- חשיפה לשמש לפני טיפול: המתיני שבועיים ובדקי את עורך.

לאחר השיזוף, המתיני לפחות שבועיים לפני שתתמשי במכשיר. בצעי בדיקת עור (עייני בפסקה 'השימוש הראשון ובדיקת העור' שבפרק 'השימוש במכשיר') על האזור המיועד לטיפול, על מנת לקבוע את עוצמת הבזקי האור המתאימים. אם לא תבצעי את הבדיקה, את עלולה להגדיל את הסיכון להתפתחות גירויים בעור לאחר הטיפול במסיר השיער.

- חשיפה לשמש לאחר טיפול: לאחר הטיפול במסיר השיער, המתיני 48 שעות לפני השיזוף.

המתינו לפחות 48 שעות לאחר הטיפול, ולפני שתטפלי באזורים שנחשפו לשמש. אפילו לאחר שחלפו 48 שעות, וודאי כי העור שטופל לא מראה שום תגובה שלילית לטיפול לפני שתחשפי אותו לשמש. כסי את האזורים המטופלים לפני שתחשפי לשמש או השתמשי במסנן קרינה (+SPF 30) בשבועיים שלאחר טיפול. חשיפת אזורים שטופלו לאור שמש ללא קרם הגנה מיד לאחר הטיפול, מעלה את הסיכון לתופעות לוואי שליליות וגירויים בעור. עייני בסעיף 'תופעות לוואי אפשריות וגירויים בעור' שבפרק 'השימוש במכשיר'.

- שיזוף עם תאורה מלאכותית

פעלי בהתאם להנחיות בסעיפים 'חשיפה לשמש לפני טיפול' ו- 'חשיפה לשמש לאחר טיפול' דלעיל.

- שיזוף עם תכשירי שיזוף

אם השתמשת בתכשיר לשיזוף מלאכותי, המתיני עד שתכשיר השיזוף ייעלם לחלוטין לפני שתשתמשי במסיר השיער

הערה: לפרטים נוספים על תגובות לא רצויות של העור, עייני בסעיף 'תופעות לוואי אפשריות וגירויים בעור' שבפרק 'השימוש במכשיר'.

השימוש במכשיר

בדקי את טבלת 'עוצמות הבזקי אור מומלצות' שבפרק 'הכנה לשימוש' כדי לקבוע אילו עוצמות אור מתאימות ביותר לעור ולצבע שיער הגוף שלך. השתמשי במכשיר רק בחדר מואר היטב. בכך תוכלי להפחית את בהירות הבזקי האור הנראים. גלחי את האזור שאת מתכוונת לטפל בו לפני שתשתמשי במכשיר (עייני בסעיף 'הכנת אזורי הטיפול' שבפרק 'הכנה לשימוש').

אם הטיפול הופך להיות כואב בכל נקודת זמן, להפחיתי את הגדרת עוצמת הבזקי האור עד שהטיפול ישוב להיות נוח יותר. אם את מבחינה בגירוי חזק יותר מאשר אדמומיות קלה, הפסיקי את הטיפול באופן מיידי ועייני בסעיף 'תופעות לוואי אפשריות וגירויים בעור' שבפרק זה.

בחירת המכלול הנכון

- מכלול הסרת שיער מהגוף

תוכלי להשתמש במכלול הסרת השיער מהגוף לטיפול בשיער גוף לא רצוי בכל האזורים בגוף שמתחת לצוואר (לחריגים, עייני בפרק "הגבלות בשימוש").

מכלול הסרת השיער מהגוף יכול לכסות שטח של 4 סמ"ר ותוכנן במיוחד לטיפול מהיר יותר באזורים גדולים כמו הרגליים.

לעולם אל תשתמשי בקובץ במכלול הסרת השיער מהגוף על הפנים.

- מכלול הסרת השיער המדויק

מכלול הסרת השיער המדויק כולל מסנן אור משולב נוסף ויכול לשמש לטיפול בטוח בשיער פנים לא רצוי בשפה, הסנטר והלחיים העליונים. תוכלי להשתמש בו גם באזורים רגישים אחרים בגוף, כמו למשל, אזור בית השחי, הביקיני או אזורים קשים להגעה.

לעולם אל תשתמשי במכשיר סביב העיניים או בסמוך לגבות.

השימוש הראשון ובדיקת העור

בעת השימוש במכשיר בפעם הראשונה או לאחר השיזוף האחרון, אנו מייעצים לך לבצע בדיקת עור בכל אחד מהאזורים המיועד לטיפול כדי לבדוק את תגובת עורך לטיפול וכדי להתרגל לטיפול המבוסס על הבזקי אור.

- שיזוף עם תכשירי שיזוף

אם השתמשת בתכשיר לשיזוף מלאכותי, המתיני עד שתכשיר השיזוף ייעלם לחלוטין לפני שתשתמשי במסיר השיער

הערה: לפרטים נוספים על תגובות לא רצויות של העור, עייני בסעיף 'תופעות לוואי אפשריות וגירויים בעור' שבפרק 'השימוש במכשיר'.

השימוש במכשיר

בדקי את טבלת 'עוצמות הבזקי אור מומלצות' שבפרק 'הכנה לשימוש' כדי לקבוע אילו עוצמות אור מתאימות ביותר לעור ולצבע שיער הגוף שלך. השתמשי במכשיר רק בחדר מואר היטב. בכך תוכלי להפחית את בהירות הבזקי האור הנראים. גלחי את האזור שאת מתכוונת לטפל בו לפני שתשתמשי במכשיר (עייני בסעיף 'הכנת אזורי הטיפול' שבפרק 'הכנה לשימוש').

אם הטיפול הופך להיות כואב בכל נקודת זמן, להפחיתי את הגדרת עוצמת הבזקי האור עד שהטיפול ישוב להיות נוח יותר. אם את מבחינה בגירוי חזק יותר מאשר אדמומיות קלה, הפסיקי את הטיפול באופן מיידי ועייני בסעיף 'תופעות לוואי אפשריות וגירויים בעור' שבפרק זה.

בחירת המכלול הנכון

- מכלול הסרת שיער מהגוף

תוכלי להשתמש במכלול הסרת השיער מהגוף לטיפול בשיער גוף לא רצוי בכל האזורים בגוף שמתחת לצוואר (לחריגים, עייני בפרק "הגבלות בשימוש").

מכלול הסרת השיער מהגוף יכול לכסות שטח של 4 סמ"ר ותוכנן במיוחד לטיפול מהיר יותר באזורים גדולים כמו הרגליים.

לעולם אל תשתמשי בקובץ במכלול הסרת השיער מהגוף על הפנים.


- מכלול הסרת השיער המדויק

מכלול הסרת השיער המדויק כולל מסנן אור משולב נוסף ויכול לשמש לטיפול בטוח בשיער פנים לא רצוי בשפה, הסנטר והלחיים העליונים. תוכלי להשתמש בו גם באזורים רגישים אחרים בגוף, כמו למשל, אזור בית השחי, הביקיני או אזורים קשים להגעה.

לעולם אל תשתמשי במכשיר סביב העיניים או בסמוך לגבות.

השימוש הראשון ובדיקת העור

בעת השימוש במכשיר בפעם הראשונה או לאחר השיזוף האחרון, אנו מייעצים לך לבצע בדיקת עור בכל אחד מהאזורים המיועד לטיפול כדי לבדוק את תגובת עורך לטיפול וכדי להתרגל לטיפול המבוסס על הבזקי אור.

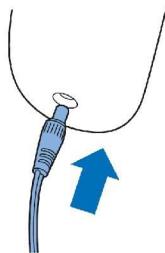

1 בחרי את המכלול המתאים לאזור המיועד לטיפול

2 בחרי אזור קרוב לאזור שאת מתכוונת לטפל בו.

3 הכניסו את התקע הקטן לתוך המכשיר והכניסו את ספק הכוח לשקע החשמל בקיר.

הערה: ודאי שמכלול הסרת השיער מהגוף מחובר למכשיר.

4 לחצי על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את המכשיר.

הערה: המכשיר תמיד בוחר באופן אוטומטי את הגדרת עוצמת הבזק האור הנמוכה ביותר. עיינו בסעיף 'עוצמות הבזקי האור' שבפרק 'הכנה לשימוש' כדי לקבוע את עוצמת הבזקי האור המתאימה.

הניחי את המכשיר על העור בזווית של 90° , כך שמכלול הסרת השיער הגוף יבוא במגע עם העור. לחצי בחוזקה את המכשיר על העור כדי להבטיח מגע עם העור.

עצה: לשימוש קל יותר, מתחי את העור באזור שתרצי רוצה לטפל בו.

● המכשיר מבצע אבחון אוטומטי של גוון העור.


- כאשר נורית חיווי 'מוכן להבזקת האור' בחלק האחורי של המכשיר מוארת בלבן, העור שלם מוכן לטיפול עם המכשיר ותוכלי להמשיך.

- כאשר נורית חיווי 'מוכן להבזקת האור' מהבהבת תחילה בצבע כתום, ולאחר מכן, מוארת בקביעות בצבע כתום, העור שלך אינו מתאים לטיפול עם המכשיר, והמכשיר יפסיק לפעול. ייתכן ותוכלי להשתמש במכשיר להסרת השיער על חלקים פחות שזופים של הגוף.

שהמכשיר מוכן להבזיק שוב. נורית החיווי 'מוכן להבזק' תהבהב שוב בחלק האחורי של המכשיר כדי לציין שהמכשיר נטען. המתני עד שנורית החיווי תיכבה כדי להמשיך בטיפול.

עצה: לטיפול יעיל יותר, המשיכי ללחוץ על לחצן הבזק האור בעת שאת מחליקה את המכשיר מעל העור שלך.

אל תטפלי בדיוק באותו האזור מספר פעמים במהלך מחזור אחד. בכך לא תשפרי את יעילות הטיפול, אך את עלולה להגביר את הסיכון להיווצרות גירויים בעור.

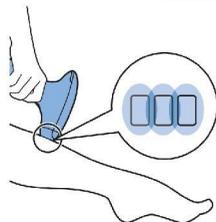

5 כדי להימנע מאזורים לא מטופלים, ודאי שההבזקים נוצרים קרוב אחד לשני. שימי לב שהבזק האור היעיל מגיע רק מחלון יציאת הבזקי האור. עם זאת, תמיד וודאי שאת לא מבזיקה באותו האזור יותר מפעם אחת.

6 לאחר שסיימת את הטיפול, לחצי במשך כ- 2 על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי לכבות את המכשיר.

7 בדקי את חלון יציאת הבזקי האור ואת מכלול הסרת השיער מהגוף והסירי מהם שיער ולכלוך. נקי את המכשיר לאחר כל שימוש (עייני בפרק 'ניקוי ותחזוקה').

תוכנית טיפול ויעילות

מחזור צמיחת שיער אופייני מלא עשוי להימשך 24-18 חודשים. במהלך תקופה זו, ייתכן שיידרשו טיפולים מרובים עם המכשיר להסרת השיער על מנת להשיג הפחתת שיער לצמיתות. היעילות של הפחתת שיער משתנה מאדם לאדם בהתאם לאזור בגוף, צבע השיער וכיצד את משתמשת במכשיר להסרת השיער

כיצד להשיג תוצאות מיטביות

- טבעי הדבר ששערות עדיין נראות לעין לאחר הטיפולים הראשונים (למידע נוסף עייני בפסקה 'עיקרון הפעולה' שבפרק 'מבוא').

- כדי להסיר בהצלחה את כל השערות ולמנוע מזיקי שיער לחזור לפעילות, בחודשים הראשונים יש לחזור על הטיפולים אחת לשבועיים. עד אז העור שלך חייב להיות חלק ונטול שיער. אנא קראי את הסעיף "שלב התחזוקה" כדי לברר כיצד תוכלי לשמור על תוצאות הסרת שיער מיטביות.

שלב התחזוקה

- על מנת להבטיח כי העור שלך נשאר חלק ונטול שיער, אנו מייעצים לך לחזור על הטיפול כל ארבעה עד שישה שבועות. הזמן בין הטיפולים עשוי להשתנות בהתאם להתחדשות צמיחת השיער האישי שלך, ובהתאם לקצב הצמיחה באזורי הגוף השונים. אם שערות רבות מדי צומחות חזרה בין הטיפולים, פשוט קצרי את מרווח הזמן בין טיפול לטיפול, אך תטפלי בכל אזור בתדירות גבוהה יותר מפעם אחת בשבועיים. כאשר את משתמשת במכשיר בתדירות גבוהה יותר מהמומלץ, את לא תגדילי את היעילות אולם את עלולה להגדיל את הסיכון לגירויים בעור.

זמני טיפול ממוצעים

מכלול מומלץ	זמן טיפול ממוצע	אזור
מכלול הגוף/המכלול המדויק	1 דקה לכל בית שחי	מתחת לבית השחי
מכלול הגוף/המכלול המדויק	1 דקה לכל צד	קו הביקיני
מכלול הגוף/המכלול המדויק	4 דקות	בתוך אזור הביקיני
מכלול הגוף	8 דקות	אזור הרגל התחתון
מכלול הגוף	14 דקות	כל הרגל
מכלול הגוף	1 דקה	שפה עליונה/סנטר/לחי


הערה: זמני הטיפול הממוצעים דלעיל נקבעו במהלך מחקר ובדיקות. זמני טיפול פרטניים עשויים להשתנות מאשה לאשה.

אזורי טיפול מיועדים

המכשיר מיועד לטיפול בשיער לא רצוי מתחת לבית השחי, הזרועות, הבטן, אזור הביקיני והרגליים. אין להשתמש בכשיר על הפנים.

שימוש במכשיר על הרגליים

בדקי את טבלת עוצמות הבזקי האור המומלצים שבפסקה 'עוצמת הבזק האור' שבפרק 'הכנות לשימוש' כדי לבדוק אילו הגדרות מתאימות לרגליים שלך.

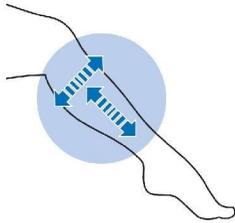

- תוכלי להעביר את המכשיר מעלה ומטה או לרוחב הרגל, בהתאם לנוחיותך. על מנת לשמור על מגע מלא עם העור תוכלי גם למקם ולהחזיק את המכשיר על העור שלך שבצדי הרגליים.

הערה: אזורים בולטים כמו עצם השוק והקרסוליים רגישים יותר מאשר אזורים אחרים של הגוף. בעת שאת לוחצת בחוזקה על מכלול הסרת השיער באזורים אלה, העור עלול להיות רגיש יותר לגירויים בעור, כמו למשל אדמומיות. עייני בסעיף 'תופעות לוואי אפשריות וגירויים בעור' שבפרק זה. לחצי את מכלול הסרת השיער בגוף כך שהלחיצה תספיק לגרום לנורית החיווי 'מוכן להבזק' להאיר, אך לא תהיה חזקה יותר.

שימוש במכשיר על אזור הביקיני

בדקי את טבלת עוצמות הבזקי האור המומלצות שבפרק 'הכנה לשימוש', כדי לבדוק אילו הגדרות מתאימות לאזור הביקיני שלך.


באופן עקרוני, מכשיר הסרת השיער הוא מספיק בטוח ועדין לטיפול בכל אזור הביקיני (לדוגמא, לסגנון 'ברזילאי' או 'הוליווד'). השתמשי בהגדרה נמוכה יותר על פיגמנט עור כהה יותר, ורגיש יותר, באזור הביקיני. אל תשתמשי במכשיר בשפות הפנימיות, בנרתיק ובפי הטבעת. גברים המעוניינים לטפל באזור הערווה שלהם חייבים להקפיד לא להשתמש במכשיר על שק האשכים.

הערה: אם תרצי להשאיר מעט שיער במקומו, כמו למשל, במקרה של עיצוב "ברזילאי", וודאי כי בעת הטיפול חיישן צבע העור לא ממוקם על השיער שנותר, דבר שעלול לגרום לחסימת המכשיר.

הערה: מסיבות היגייניות, נקי תמיד את מכלול הסרת השיער בגוף לפני שאת מתחילה טיפול באזור אחר בגוף (עייני בפרק 'ניקוי ותחזוקה').

שימוש במכשיר מתחת לבית השחי

בדקי את טבלת עוצמות הבזקי האור המומלצות שבפרק 'הכנה לשימוש', כדי לבדוק אילו הגדרות מתאימות לבית השחי שלך. לפני הטיפול, הקפידו להסיר שאריות דאודורנט, בושם, קרם או מוצר טיפוח לעור אחר מבית השחי שלך.

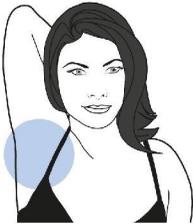

עצה: כדי להשיג תוצאות הסרת שיער מיטביות בבית השחי שלך, עמדי מול מראה כדי לקבל תצוגה טובה של האזור המטופל ומבט רציף עם נורית חיווי 'מוכן להבזק'. הרימי את הזרוע והניחי את ידך על העורף שלך כדי למתוח את העור באזור בית השחי.

הערה: האור המוחזר אינו יפגע בעיניים שלך. אם האור המוחזר מפריע לך, עצמי את העיניים שלך כאשר את משחררת את הבזק האור.

הסרת שיער מאזור הפנים (השפה העליונה, הסנטר והלחיים)

בדקי את עוצמת הבזק האור המומלצת בטבלה שבפרק "הכנה לשימוש" בסעיף "עוצמות הבזקי אור מומלצות" כדי להגדיר את העוצמה המתאימה לפנייך (השפה העליונה, הסנטר והלחיים).

השתמשי רק במכלול הסרת השיער המדויק להסרת שיער מהפנים (שפה עליונה, סנטר והלחיים). לעולם אל תשתמשי במכשיר באזור העיניים והגבות. בעת הטיפול בשפה העליונה, סנטר והלחיים, אל תחשפי את הפנים לשמש ב- 24 השעות שלאחר הטיפול. במידה ואת חייבת להיחשף לשמש, מרחי קרם הגנה בדרגה של SPF 30 לפחות במשך שבועיים לאחר הטיפול.

זהירות: בעת הטיפול באזור מעל השפה העליונה, היזהרי לא להבזיק אור על השפה.

עצה: מרחי שכבה עבה של תכשיר איפור אייליינר לבן על השפה ועל שולי השפה שלך. קו לבן זה יבטיח כי האנרגיה של הבזק האור תוחזר ולא תיגע בשפה שלך שלא במתכוון. השתמשי רק באייליינר לבן. כל צבע אחר סופג את האור ועלול לגרום לגירוי בעור.

עצה: להשגת תוצאות מיטביות בשפה העליונה, הסנטר והלחיים, עמדי מול ראי על מנת לראות את אזור הטיפול ואת נורית החיווי "מוכן להבזק האור".

עצה: בגלל קו המתאר של הלסתות, ייתכן ותהיה בעיה להביא את מערכת הבטיחות המובנית למגע מלא עם העור ולשחרר הבזק אור. הצמידי את הלשון בין השיניים לשפה העליונה או נפחי את הלחיים כדי לאפשר יצירת מגע מלא של הטבעת עם העור.

הערה: האור המשתקף אינו פוגע בעיניים ואינו גורם נזק לראייה. אם ההבזק מסנוור אותך, עצמי את העיניים בזמן ההבזק.

כדי להבטיח תוצאות הסרת שיער מיטביות ושמירה על תפקוד תקין של המכשיר לאורך זמן, עלייך לנקות את המכשיר לפני ואחרי כל שימוש, ובמידת הצורך, גם במהלך הטיפול. המכשיר מאבד את יעילותו אם לא תנקי אותו כהלכה.



לעולם אל תנקי את המכשיר או את חלקיו מתחת לברז או במדיח הכלים.

לעולם אל תשתמשי בכריות קרצוף, חומרי ניקוי שוחקים או נזילים ממסים כמו, בנזין או אצטון כדי לנקות את המכשיר.

לעולם אל תשרטי את חלון יציאת הבזק האור או את המסגרת המתכתית בתוך מכלול הסרת השיער בגוף.

הערה: הפסיקי את השימוש במכשיר כאשר כבר לא ניתן לנקות את חלון יציאת הבזקי האור ואת מכלול הסרת השיער בגוף.

1 כבי את המכשיר, נתקי אותו מרשת החשמל ואפשרי לו להתקרר.

הערה: חלון יציאת הבזקי האור מתחמם במהלך שימוש. וודאי שהוא מתקרר לפני שאת מנקה אותו.

2 כדי להסיר את ואת מכלול הסרת השיער בגוף, אחזי בבליטות שבחלק העליון והתחתון, ומשכו בעדינות.

3 במידת הצורך, נקי את החלק החיצוני של המכשיר בעזרת מטלית הניקוי רכה.

4 הרטיבי מעט מטלית רכה עם מספר טיפות מים, והשתמשי בו כדי לנקות את החלקים

הבאים:

- חלון יציאת הבזקי האור
- פני השטח החיצוניים של גוף מכלול הסרת השיער בגוף
- המסגרת המתכתית שבתוך מכלול הסרת השיער בגוף
- זכוכית המסנן האדמדמה בתוך מכלול הסרת השיער המדויק.

ודאי כי מגעים האלקטרוניים לא יירטבו.

הערה: אם המים לא מנקים ביעילות, עלייך להשתמש במספר טיפות של אלכוהול בריכוז גבוה כדי לנקות את החלקים המפורטים לעיל.

הערה: הקפיד לנקות את המכשיר לפני ואחרי כל שימוש, ובמידת הצורך, גם במהלך הטיפול על פי ההוראות שבסעיף זה.

טבלת גווני עור ושערות גוף

Hair Colour	Skin Tone						
	I	II	III	IV	V	VI	
	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	

✓ = suitable / odpowiedni / vhodné / vhodné / megfelelő / pogodno / primerno / adecvat / κατάλληλο / подходящий

✗ = not suitable / nieodpowiedni / použítí není vhodné / nevhodné / nem megfelelő / nije pogodno / ni primerno / neadecvat / ακατάλληλο / не е подходящ